



FOTEL MEDYCZNY GERIATRYCZNY

Z PODNÓŻKAMI

ACTI YFG2



ERGONOMICZNY DESIGN ✓

TRÓJPOZYCYJNA REGULACJA ✓

TRWAŁA, STALOWA KONSTRUKCJA ✓



YFG2

FOTEL GERIATRYCZNY

OPIŚ

Fotel medyczny geriatryczny z podnóżkami został zaprojektowany z myślą o profesjonalnej opiece nad pacjentami geriatrycznymi oraz wsparciu procesu rekonwalescencji. Dzięki swojej funkcjonalności i wyjątkowemu komfortowi, fotel doskonale sprawdza się podczas użytku domowego, ale także w placówkach opiekuńczych. Zapewnia wygodę również podczas długotrwałych procedur medycznych, takich jak dializy, terapie oddechowe, opieka kardiologiczna czy pobieranie krwi, gwarantując pacjentowi wygodę przez wiele godzin.

Sprawdza się doskonale w:

- ✓ Opiece domowej
- ✓ Domach opieki
- ✓ Hospicjach
- ✓ Szpitalach
- ✓ Laboratoriach diagnostycznych

FOTEL GERIATRYCZNY

FUNKCJE

- ✓ trzy pozycje użytkowe: siedząca, półleżąca oraz z uniesionym podnóżkiem
- ✓ regulowane oparcie pleców, zagłówek i podnóżek
- ✓ uchwyt do prowadzenia fotela
- ✓ mechanizm blokady pozycji
- ✓ składany stolik



- ✓ cztery obrotowe kółka jezdne
- ✓ dwa hamulce kół tylnych

FOTEL GERIATRYCZNY

ZALETY



✓ **Ergonomiczne profilowanie i wygoda**

Wzmocnione kontury, grube i gęste wypełnienie z gąbki oraz wbudowany zagłówek gwarantują maksymalny komfort podczas długotrwałego siedzenia.

✓ **Trwała, stalowa konstrukcja**

Rama fotela wykonana jest z powlekanej stali o wysokiej wytrzymałości, która zapewnia stabilność, odporność na uszkodzenia oraz udźwig do 150 kg.

✓ **Wytrzymałość i higiena**

Siedzisko, oparcie oraz podnóżek zostały obszyte zaawansowanym materiałem medycznym (PU). Poliuretanowa powłoka nie absorbuje płynów ustrojowych ani leków, co pozwala na błyskawiczne usuwanie zabrudzeń. Materiał ten jest przyjemny dla skóry pacjenta, a jednocześnie wyjątkowo trwały.

FOTEL GERIATRYCZNY

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary i parametry:


- Wymiary całkowite: 1200 × 635 × 1040 mm
- Wymiary siedziska: 530 × 482 × 482 mm
- Wymiary stolika: 650 × 390 mm
- Regulacja oparcia: 37°–61°
- Regulacja podnóżka: 13°–36°
- Wysokość siedziska od podłoża: 660 mm
- Szerokość pomiędzy podłokietnikami: 508 mm
- Średnica kół: 125 mm
- Maksymalne obciążenie: 150 kg
- Masa: 45 kg



FOTEL GERIATRYCZNY

BUDOWA

1. Segment nóg
2. Siedzisko
3. Podłokietnik
4. Oparcie
5. Zagłówek
6. Uchwyt transportowy
7. Podnóżek
8. Kółka
9. Stolik
10. Hamulce kół tylnych
11. Mechanizm regulacji oparcia

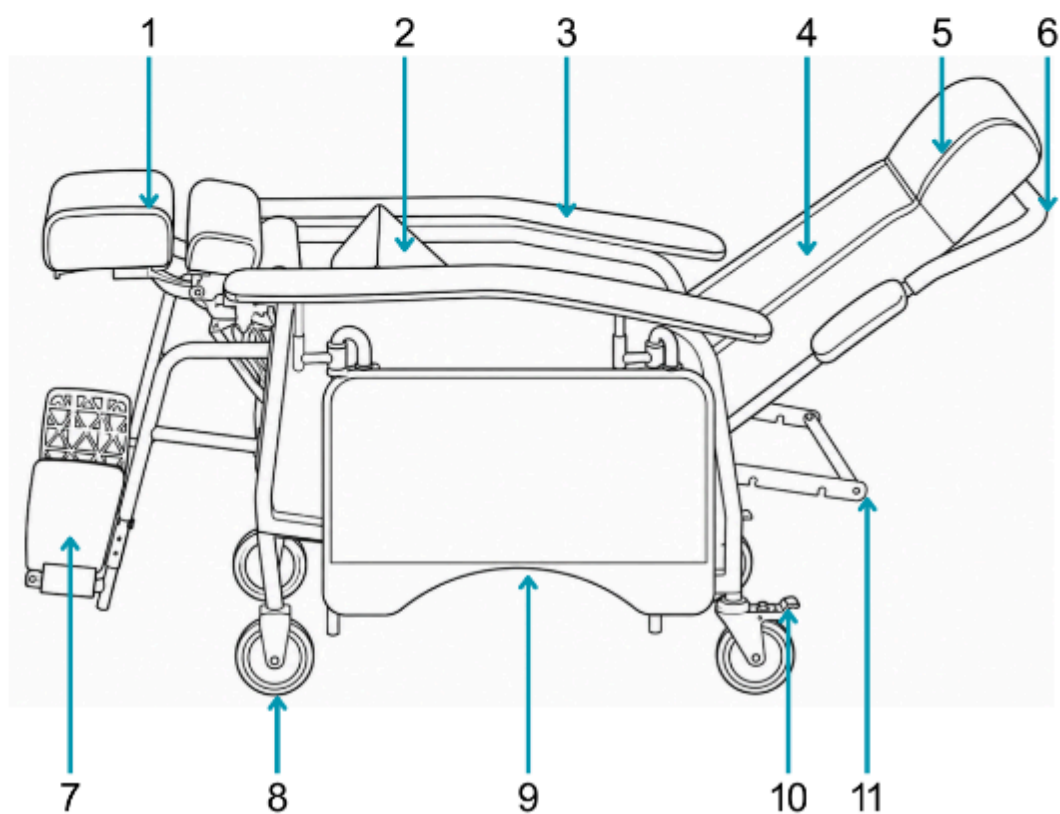




IMPORTER

ACTI Sp. z o.o. ul. Bagatela 15, lok 73

00-585 Warszawa NIP: 5252519566

E-mail: biuro@acti4med.pl

Tel.: +48 600 160 147

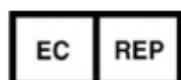

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522
2909VA Capelle aan den IJssel, Holandia



www.acti4med.pl



www.instagram.com/acti_pl



YouTube

www.instagram.com/acti_pl