





Acti

WYSIĘGNIK DO ŁÓŻEK

SZPITALNYCH



WYGODA PODNOSZENIA PACJENTA 
SOLIDNA KONSTRUKCJA 

SZP_W





WYSIĘGNIK DO ŁÓŻEK

OPIS

Wysięgnik do łóżek szpitalnych służy do wspomagania samodzielnej zmiany pozycji przez pacjenta leżącego na łóżku medycznym. Umożliwia podciąganie się, unoszenie tułowia oraz odciążenie personelu medycznego podczas wykonywania czynności pielęgnacyjnych.

Instalowany jest w specjalnie przeznaczonym do tego celu gnieździe w ramie łóżek Acti CARE PLUS, Acti COMFORT, Acti REST.

Wyrób przeznaczony jest do stosowania w:

-  Oddziałach szpitalnych
-  Domach opieki
-  Hospicjach
-  Opiece domowej




WYSIĘGNIK DO ŁÓŻEK

CECHY

- ✔ Konstrukcja wyrobu zapewnia stabilny punkt podparcia w postaci uchwytu zawieszonoego na ramieniu wysięgnika za pomocą pasa regulacyjnego. Podczas użytkowania część ciężaru ciała pacjenta przenoszona jest na wysięgnik, co umożliwia:
 - podciągnięcie tułowia,
 - zmianę pozycji ciała (np. z leżącej do półsiedzącej),
 - odciążenie wybranych partii ciała,
 - ułatwienie wykonywania czynności pielęgnacyjnych.
- ✔ Działanie wyrobu opiera się na przenoszeniu sił z uchwytu dłoniowego poprzez pas regulacyjny na konstrukcję nośną wysięgnika, a następnie na ramę łóżka medycznego, do którego wysięgnik jest zamocowany. Regulowany pas umożliwia dostosowanie wysokości uchwytu do indywidualnych potrzeb pacjenta, co pozwala na ergonomiczne i bezpieczne użytkowanie.
- ✔ Regulowany pas umożliwia dostosowanie wysokości uchwytu do indywidualnych potrzeb pacjenta, co pozwala na ergonomiczne i bezpieczne użytkowanie.

WYSIĘGNIK DO ŁÓŻEK

WYMIARY

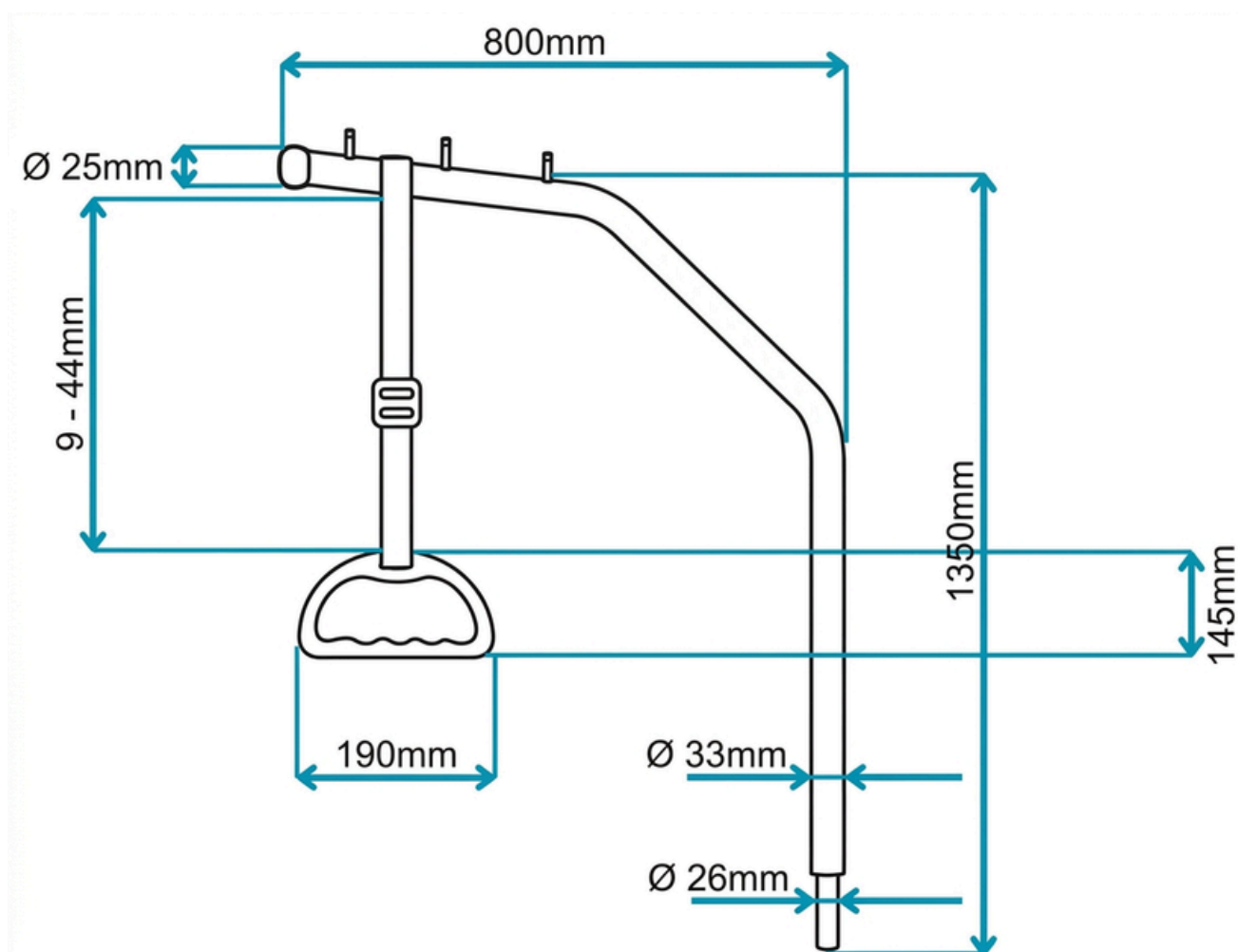

WYSIĘGNIK DO ŁÓŻEK

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne:

1350x800x25 mm

Maksymalny udźwig:

150 kg

W skład zestawu wchodzi:

- rama wysięgnika – 1 szt.
- pas regulacyjny z uchwytem dłoniowym – 1 szt.
- elementy montażowe – 1 zestaw
- instrukcja używania – 1 szt.

Materiały wykonania:

- rama wysięgnika: stal malowana





IMPORTER

ACTI Sp. z o.o. ul. Bagatela 15, lok 73

00-585 Warszawa NIP: 5252519566

E-mail: biuro@acti4med.pl

Tel.: +48 600 160 147



www.acti4med.pl



www.instagram.com/acti_pl



www.instagram.com/acti_pl