



ŁÓŻKO

# SZPITALNE

ACTI COMFORT PLUS



ELEKTRYCZNE STEROWANIE ✓

REGULACJĄ WYSOKOŚCI ✓

SOLIDNA KONSTRUKCJA ✓

PRAKTYCZNE DODATKI ✓



SZP3

# ŁÓŻKO SZPITALNE ACTI COMFORT PLUS

## OPIS

Łóżko szpitalne ACTI COMFORT PLUS to optymalne rozwiązanie zarówno dla oddziałów szpitalnych ogólnych lub geriatrycznych, jak i dla użytkowników indywidualnych do opieki domowej.


ACTI COMFORT PLUS jest łóżkiem o konstrukcji pantografowej, które zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej higienie, bezpieczeństwie pacjenta oraz ułatwieniu pracy personelu medycznego.

Dzięki szeregowi funkcjonalności oraz odpowiednio dobranym materiałom, nadaje się doskonale do:

- ✓ Niepublicznych placówek medycznych
- ✓ Domów opieki
- ✓ Mieszkań prywatnych
- ✓ Ogólnych oddziałów szpitalnych

# ŁÓŻKO SZPITALNE ACTI COMFORT PLUS

## KLUCZOWE PARAMETRY

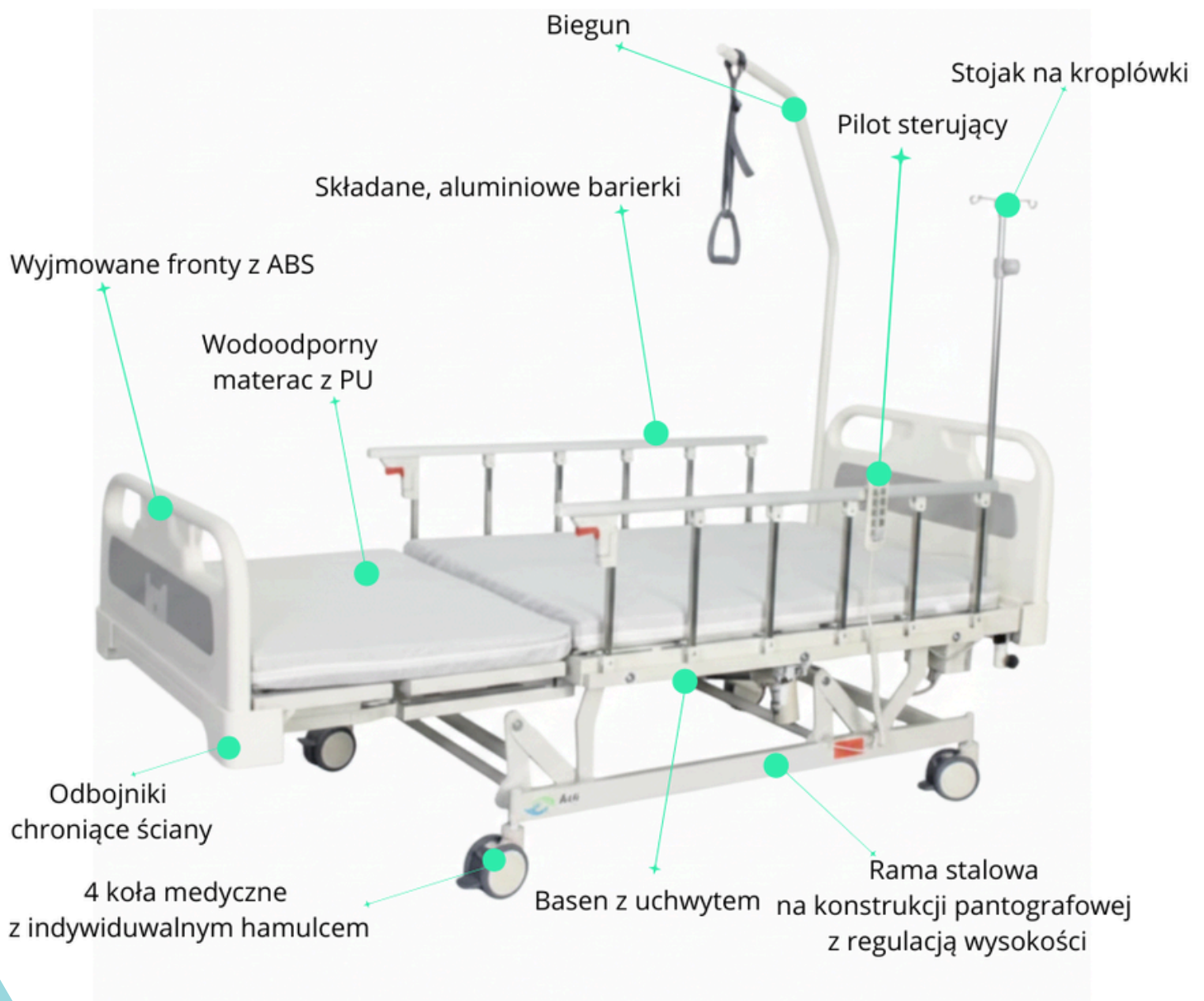

# ŁÓŻKO SZPITALNE ACTI COMFORT PLUS

## WYPOSAŻENIE W ZESTAWIE



**Praktyczna umywalka do mycia głowy**



**Stolik nakładany na barierki typu tablet**



**Stojak na kroplówkę**



**Materac wodoodporny w pokrowcu paroprzepuszczalnym**



**Wygodny pilot do sterowania funkcjami łóżka**



**Elektrycznie chowany/wysuwany basen z uchwytem**

# ŁÓŻKO SZPITALNE ACTI COMFORT PLUS

## ZALETY

- ✔ **Łatwa regulacja pozycji**  
Dzięki zautomatyzowanemu systemowi elektrycznej regulacji, możliwe jest łatwe dostosowanie pozycji oparcia, podnóżka oraz całego materaca. Intuicyjny pilot sterujący umożliwia szybkie przełączanie między ustawieniami, pozwalając na indywidualne dopasowanie do potrzeb pacjenta.
- ✔ **Funkcja boczego przechylenia pacjenta**  
Łóżko posiada sterowaną elektrycznie z pilota funkcję przechylenia boczego pacjenta na materacu do max 45°, co ułatwia wykonywanie czynności pielęgnacyjnych, odciąża opiekuna, a także zapobiega powstawaniu odleżyn poprzez możliwość naprzemiennej zmiany pozycji ciała pacjenta. Funkcja czasomierza na pilocie umożliwia zaprogramowanie czasu, po którym nastąpi automatyczny przechył pacjenta na materacu w przeciwną stronę.



# ŁÓŻKO SZPITALNE ACTI COMFORT PLUS

## ZALETY

- ✔ Sekcje oparcia oraz sekcja pod kością krzyżową zmieniają położenie automatycznie podczas przyjmowania pozycji siedzącej. Gwarantują eliminację zsuwania pacjenta w dół oraz zabezpieczenie przed przechyleniem poza powierzchnię materaca.
- ✔ Bezpieczna pozycja siedząca pozwala na wczesną pionizację oraz wygodne przyjmowanie posiłków.



# ŁÓŻKO SZPITALNE ACTI COMFORT PLUS

## ZALETY

- ✔ **Komfort i bezpieczeństwo**  
Solidna konstrukcja pantografowa gwarantują bezpieczne użytkowanie nawet przez długi czas. Składane barierki zabezpieczają pacjenta na całej długości leża, ale jednocześnie pozwalają na szybkie i łatwe ich złożenie w razie potrzeby pionizacji lub lepszego dostępu do chorego.
- ✔ **Estetyka i trwałość**  
Wykonane z wysokiej jakości materiałów, łóżko charakteryzuje się nie tylko nowoczesnym designem, ale również wysoką odpornością na intensywne użytkowanie, co przekłada się na długowieczność produktu.
- ✔ **Szybki i łatwy montaż**  
Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zamontować koła, barierki boczne i fronty łóżka



# ŁÓŻKO SZPITALNE ACTI COMFORT PLUS

## WYPOSAŻENIE

- ✓ Konstrukcja ramy i leże wykonane są ze stali i pokryta trwałą powłoką proszkową odporną na uszkodzenia mechaniczne.
- ✓ 4 segmenty leża.
- ✓ 4 ciche koła jezdne medyczne o średnicy 125 mm, z indywidualną blokadą każdego koła.
- ✓ 4 odboje umieszczone na narożnikach ramy.
- ✓ Barierki boczne składane, wykonane z aluminium.
- ✓ Pilot sterujący zawieszany jest na barierce łóżka.
- ✓ Stolik nakładany na barierki typu tablet
- ✓ Umywalka do mycia głowy
- ✓ Elektrycznie chowany/wysuwany basen z uchwytem
- ✓ Szczyty łóżka wykonane z tworzywa ABS, wyjmowane w łatwy sposób, bez użycia narzędzi.
- ✓ Wyposażenie dodatkowe w zestawie: 1 wieszak na kroplówkę z 4 haczykami, 1 uchwyt uniwersalny (do powieszenia worka do dobowej zbiórki moczu).  
Materac z pianki PU w wodoodpornym, łatwym do czyszczenia pokrowcu PU z zamkiem błyskawicznym.




# ŁÓŻKO SZPITALNE ACTI COMFORT PLUS

## ZAKRESY I WYMIARY



0-80°

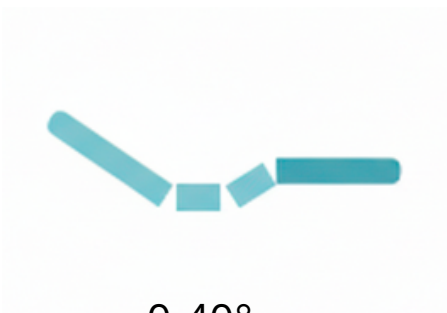

0-40°



Przechył ciała na materacu 0-45°



Regulacja wysokości 45-69 cm



Wymiary zewnętrzne 212 x 96 cm





# ŁÓŻKO SZPITALNE ACTI COMFORT PLUS

## PARAMETRY TECHNICZNE

Łóżko szpitalne D08 posiada następujące wymiary zewnętrzne:  
2120 x 960 x 450–690 mm

Łóżko szpitalne D08 w zestawie zawiera materac z pianki o grubości 8 cm, w pokrowcu wodoodpornym, paroprzepuszczalnym, zmywalnym. Wymiary materaca: 190x90x8 cm.

Funkcje elektryczne łóżka sterowane pilotem:

- regulacja wysokości leża w zakresie 450 do 690 mm
- regulacja oparcia pleców w zakresie 0° do 80 °
- regulacja sekcji kolan w zakresie 25° w górę do 65° w dół
- przechył boczny ciała na materacu w zakresie 0 do 45°

200 kg max obciążenie robocze łóżka, 260 kg nośność statyczna.

- Konstrukcja ramy i leże wykonane są ze stali i pokryta trwałą powłoką proszkową odporną na uszkodzenia mechaniczne.
- Łóżko wyposażone jest w 4 silniki
- Leże łóżka wykonane jest z 4 segmentów
- Łóżko wyposażone jest w 4 ciche kółka medyczne z centralną blokadą.
- Łóżko wyposażone jest w 4 odboje umieszczone na narożnikach ramy.
- Barierki boczne składane, wykonane z aluminium.
- Pilot sterujący zawieszany jest na barierce łóżka.
- Szczyty łóżka wykonane są z tworzywa ABS i są wyjmowane w łatwy sposób, bez użycia narzędzi.
- Każde z 4 kół jezdnych o średnicy 125 mm posiada indywidualny hamulec.
- Pilot sterujący 1 szt
- Wyposażenie dodatkowe w zestawie: 1 basen, 1 stolik, 1 wieszak na kroplówkę z 4 haczykami, 1 uchwyt uniwersalny (do powieszenia worka do dobowej zbiórki moczu).



## IMPORTER

ACTI Sp. z o.o. ul. Bagatela 15, lok 73

00-585 Warszawa NIP: 5252519566

**E-mail:** [biuro@acti4med.pl](mailto:biuro@acti4med.pl)

**Tel.:** +48 600 160 147



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle  
aan den IJssel, The Netherlands

E-mail: [ec.rep@sungoglobal.com](mailto:ec.rep@sungoglobal.com)



[www.acti4med.pl](http://www.acti4med.pl)



[www.instagram.com/acti\\_pl](https://www.instagram.com/acti_pl)



[www.instagram.com/acti\\_pl](https://www.instagram.com/acti_pl)