



# ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE REHABILITACYJNE

ACTI ASSIST



WIELOFUNKCYJNE ✓

WYGODNY ZAKRES REGULACJI ✓

PRZYJAZNE WZORNICZO ✓



YREH1

# ŁÓŻKO ACTI ASSIST

## OPIS

Łóżko elektrycznie rehabilitacyjne ACTI ASSIST to optymalne rozwiązanie w rehabilitacji i pielęgnacji pacjenta wymagającego długotrwałej opieki z uwagi na niepełnosprawność trwałą lub czasową.

Dzięki szeregowi funkcjonalności oraz odpowiednio dobranym materiałom, stanowi odpowiedź na spersonalizowane potrzeby zarówno pacjentów, jak i opiekunów, którzy wymagają pomocy i odciążenia przy codziennych czynnościach.

Łóżko polecane jest do:

- ✔ Oddziałów geriatrycznych w szpitalach
- ✔ Domów opieki
- ✔ Hospicjów
- ✔ Mieszkań prywatnych

YREH1

# ŁÓŻKO ACTI ASSIST

## ZALETY

### **Bezpieczeństwo i ergonomia użytkowania**

- Pełnowymiarowe barierki z intuicyjnym mechanizmem opuszczania gwarantują ochronę przed przypadkowym wypadnięciem, nie ograniczając przy tym poczucia przestrzeni.
- Funkcja regulacji wysokości oraz kąta nachylenia oparcia pozwala na bezpieczne i stabilne sadzanie pacjenta na brzegu łóżka. To kluczowy etap rehabilitacji, który przygotowuje ciało do nauki chodzenia.
- Możliwość podniesienia całego leża do wysokości bioder chroni kręgosłup fizjoterapeuty lub członka rodziny podczas codziennych czynności pielęgnacyjnych.
- Solidna konstrukcja na blokowanych kołach pozwala na łatwe manewrowanie łóżkiem w pokoju, zapewniając jednocześnie absolutną nieruchomość podczas wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych.
- Ergonomiczny pilot pozwala na płynną zmianę pozycji bez użycia siły fizycznej. Pacjent zyskuje niezależność, a fizjoterapeuta może w pełni skupić się na asekuracji i ćwiczeniach.



# ŁÓŻKO ACTI ASSIST

## ZALETY

### ✓ Przyjazny design

Opieka nad pacjentem w domu wymaga produktu, który doskonale wpasowuje się w środowisko i wystrój. Łóżko o specjalistycznych funkcjach ukrytych w przyjaznym, "domowym" wzornictwie, poprawia odbiór produktu i nie stygmatyzuje pacjenta.

### ✓ Wygodne regulacje

Dostępne regulacje łóżka - wysokość leża, oparcia, sekcji nóg, a także możliwa do ustawienia pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga pozwalają nie tylko na poprawienie wygody opieki nad pacjentem, ale także oferują pełny zakres konieczny do pionizacji, czy pozycji ratunkowej.



YREH1

# ŁÓŻKO ACTI ASSIST


## PRECYZYJNE STEROWANIE

- ✓ Przewodowy, ergonomiczny pilot pozwala na zawieszenie go na panelu barierkach, po dowolnej stronie, zarówno przy opuszczonych, jak i podniesionych barierkach. Wszystkie nastawy łóżka dostępne są z poziomu pilota sterującego,, na którym możliwa jest również blokada jego funkcji, co pozwala na uniknięcie niekontrolowanego sterowania łóżkiem przez pacjenta.



# ŁÓŻKO ACTI ASSIST

## KLUCZOWE PARAMETRY

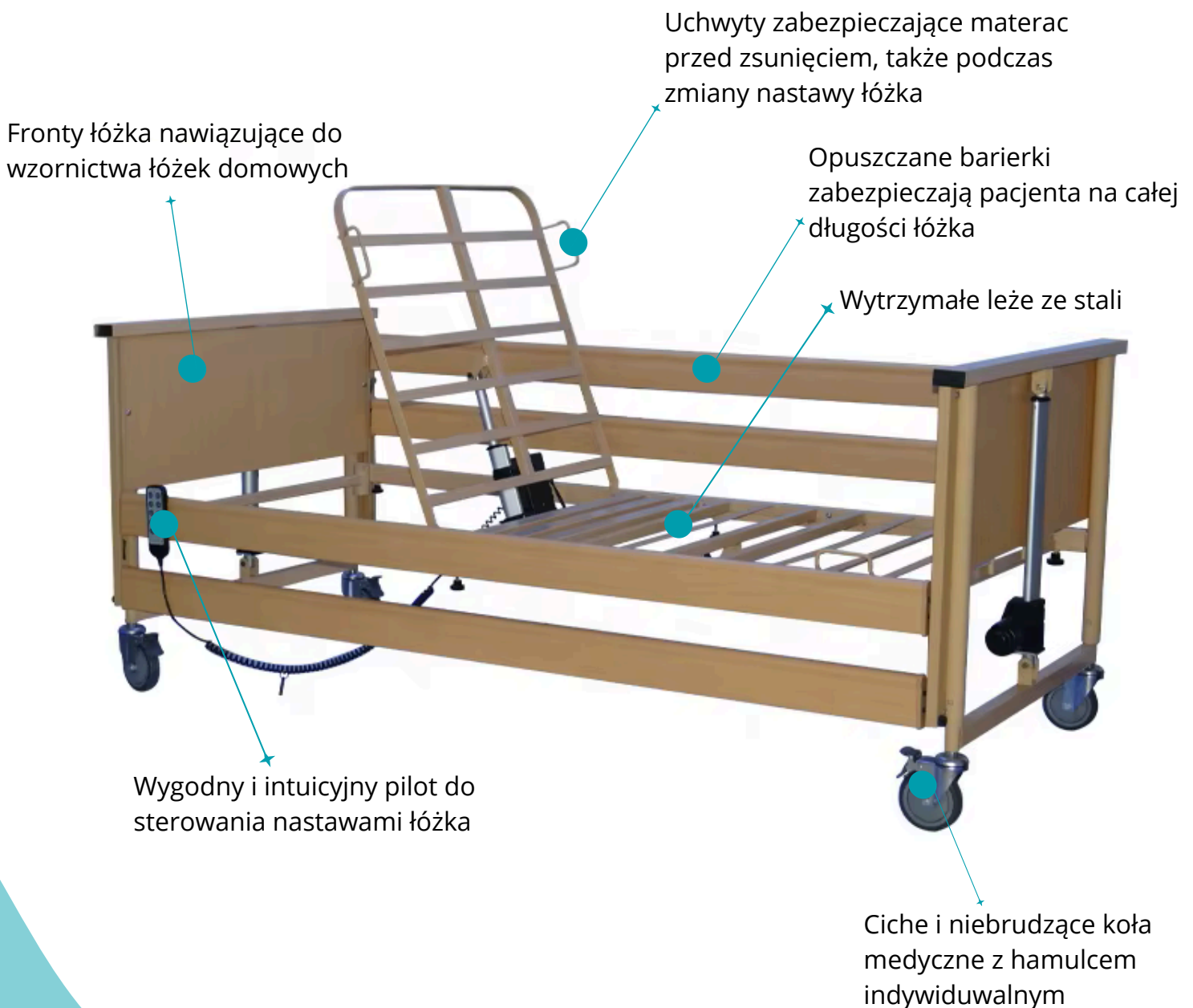


# ŁÓŻKO ACTI ASSIST

## ZAKRESY I WYMIARY

### Funkcje elektryczne łóżka sterowane pilotem:

- regulacja wysokości leża w zakresie 400-800mm
- regulacja oparcia pleców w zakresie 0° do 75°
- regulacja sekcji kolan w zakresie 0° to 45°
- pozycja Trendelenburga w zakresie 0° do 15°
- pozycja anti-Trendelenburga (Reverse Trendelenburg) w zakresie 0° do 15°

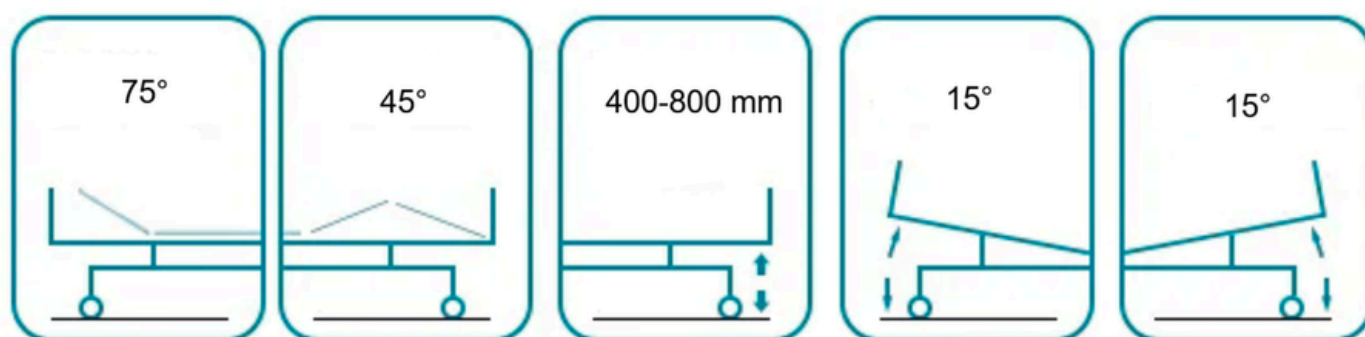

# ŁÓŻKO ACTI ASSIST

## PARAMETRY TECHNICZNE

- Wymiary zewnętrzne: 2110x1060 x 390-790 mm
- Powierzchnia leża: 1925x900mm
- Dopuszczalna masa pacjenta: 180 kg
- Łóżko nie zawiera materaca. Rekomenduje się dobranie materaca w wodoodpornym pokrowcu PU, o wymiarach: 1900 x 830 x 100 mm
- Konstrukcja ramy i leże wykonane są ze stali malowanej proszkowo. Powłoka jest odporna na uszkodzenia mechaniczne.
- Front górny i dolny są stałe.
- Składane barierki boczne wykonane są z płyty MDF.
- 4 silniki
- Leże łóżka wykonane jest z 3 segmentów, z czego 2 są ruchome.
- Ciche kółka jezdne medyczne z indywidualnym hamulcem o średnicy 150 mm 4 szt.





## IMPORTER

ACTI Sp. z o.o. ul. Bagatela 15, lok 73

00-585 Warszawa NIP: 5252519566

**E-mail:** [biuro@acti4med.pl](mailto:biuro@acti4med.pl)

**Tel.:** +48 600 160 147



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle  
aan den IJssel, The Netherlands

E-mail: [ec.rep@sungoglobal.com](mailto:ec.rep@sungoglobal.com)



[www.acti4med.pl](http://www.acti4med.pl)



[www.instagram.com/acti\\_pl](https://www.instagram.com/acti_pl)



[www.instagram.com/acti\\_pl](https://www.instagram.com/acti_pl)